



Bolsa Abierta de 2 piezas

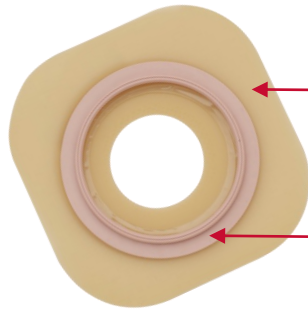

Adhesivo SoftFlex: equilibrio entre protección cutánea y adherencia. Con perfil decreciente y máxima flexibilidad para ajustes perfectos.

Anillo Flotante: atraumático al permitir el ajuste de la bolsa sin necesidad de realizar presión sobre el abdomen.

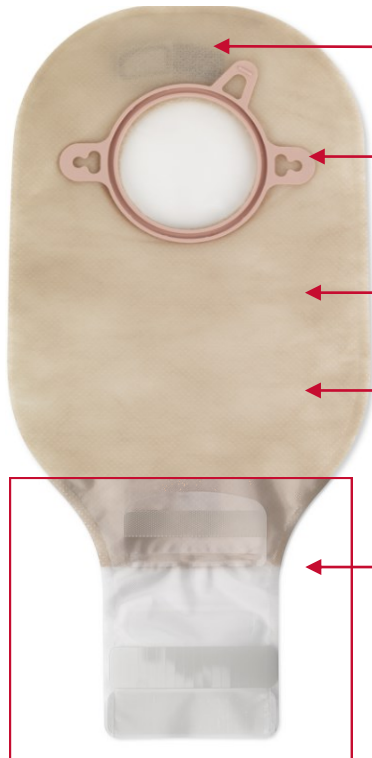

Filtro AF300 con doble membrana contrapuesta. Elimina el mal olor e incrementa la salida del flujo de aire de una forma rápida y equilibrada. Duradero y listo para usar.

Enganches para cinturón, y pestaña para facilitar la retirada de la bolsa

Cubierta de tela Non-Woven: máxima suavidad con tela "sin tejer" que permite la transpiración de la piel.

Capas anti-olor y anti-ruido: cuatro capas coextrudadas permiten eliminar el mal olor y los ruidos inducidos por el movimiento.

Reverso

Cierre integrado Lock 'n Roll Microcierre: seguro, intuitivo y sencillo e higiénico, puede abrirse y cerrarse tantas veces sean necesarias.


	Color	Estoma	Aro	C.N.	Referencia
Mini 350ml	Opaca				
		⌀13-30 mm	45 mm	400020	24742
		⌀13-40 mm	55 mm	400021	25742
Midi 580ml	Opaca				
		⌀13-30 mm	45 mm	498063	24752
		⌀13-40 mm	55 mm	495861	25752
	Transp.				
		⌀13-30 mm	45 mm	498071	24852
	⌀13-40 mm	55 mm	495879	25852	

	Color	Estoma	Aro	C.N.	Referencia
Maxi 780ml	Opaca				
		⌀13-30 mm	45 mm	498089	24762
		⌀13-40 mm	55 mm	495887	25762
		⌀13-55 mm	70 mm	498097	27762
	Transp.				
		⌀13-30 mm	45 mm	498105	24862
	⌀13-40 mm	55 mm	495895	25862	
	⌀13-55 mm	70 mm	498113	27862	


Presentación: Caja con 30 bolsas + 10 láminas estándar
 Productos financiados por S.N.S.

Descripción:

- Lámina adhesiva SoftFlex
 - Elastómero: Poliisobutileno (PIB)
 - Hidrocoloide: Carboximetilcelulosa Sódica, Pectina, Gelatina.
 - Componentes adicionales: fibras de algodón.
- Revestimiento protector de la lámina: polietileno transparente de alta densidad.
- Anillo flotante de Saranex 650.
- Aro de ajuste de lámina y bolsa de polietileno de baja densidad
- Paredes de la bolsa: película coextruida de 4 capas (antiolor y antiruidos), con un espesor de 75 micras. Tela sin tejer Non-Woven
- Filtro de carbono activado encapsulado en membrana de GORE™ impermeable a los líquidos.
- Sistema de cierre integrado Lock 'n Roll, compuesto de Polipropileno en tiras con entre-cierres tipo "champiñón" de Polipropileno/polietileno y adhesivo acrílico.
- Volumen: Mini 350 ml, Midi 580 ml, Maxi 780 ml.
- **Ningún componente contiene Látex.**

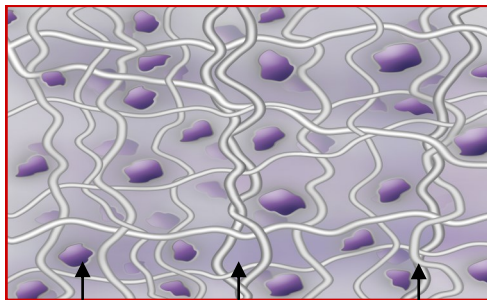

Hidrocoloide Elastómero Fibras Algodón

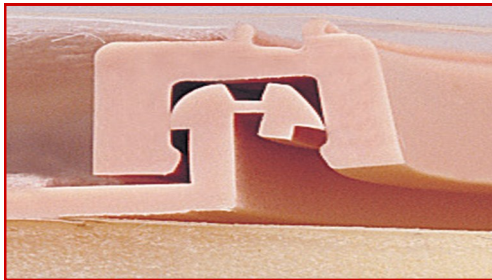


Máxima protección cutánea y adherencia

La lámina **SoftFlex** lavable es un excelente protector cutáneo, muy flexible, por lo que se adapta perfectamente a los movimientos abdominales.

Presenta perfil decreciente para asegurar una máxima adhesión; con forma romboidal para situar más adhesivo en las zonas donde se forman los pliegues abdominales.

Ajuste Seguro con CPL

Conform2 tiene un sistema único de acople **CPL**, flexible y seguro. El aro de la bolsa y de la lámina se bloquea de una manera muy sencilla. Un "Clic" audible nos asegura que la bolsa está firmemente sujeta, sin posibilidad de desprendimientos accidentales.

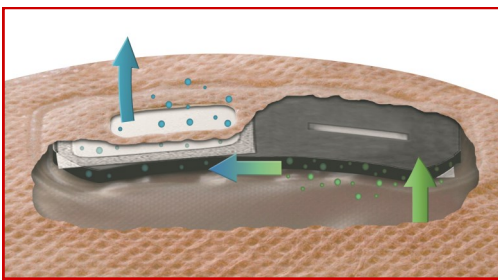

Sin Olor: AF300 con Doble Membrana Contrapuesta

El filtro **AF300** es único por su eficacia en la incorporación de nuevos materiales como membranas GORE™ y Carbón Activado; modificado químicamente. Incrementa el flujo de aire para evitar el efecto globo, pero permite un equilibrio unidireccional para contrarrestar el efecto colapso. No mancha, es limpio y dura hasta 4 días a una profundidad de 1,8 m. Está listo para su uso, no necesita manipulación, ni cubre-filtros.



Cierre Integrado Lock 'n Roll Microcierre

El cierre permite una manipulación muy sencilla y segura. En tan solo tres pasos, se pliega sobre sí mismo y se cierra presionando la pestaña ligeramente desde el centro hacia los extremos. El sistema puede lavarse, abrirse y cerrarse todas las veces que sean necesarias.

El sistema permite un vaciado controlado, una limpieza completa con agua y jabón y una comodidad y discreción total al adaptarse al contorno del cuerpo.

Presentación: caja con 30 bolsas + 10 láminas estándar

Dimensiones unidad mínima de venta: 23,3cm largo x 16,5cm ancho x 16,4cm alto (11,7cm alto 2472 y 25742)

Caducidad: 5 años



Hollister Ibérica S.A.
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27 Fax: 91 766 92 01
www.hollister.es

SEPTIEMBRE 2015