

Bolsa Abierta de 1 pieza

(* ventana en versión opaca)



Filtro AF300: permite una salida lenta del gas y su desodorización; puede ayudar a reducir el hinchado de la bolsa por gas.

Ventana de visualización: permite al profesional sanitario inspeccionar visualmente el estoma y su efluente sin necesidad de retirar la bolsa.

Cierre integrado Lock 'n Roll con Microcierres: cierre seguro e higiénico, de manipulación sencilla e intuitiva. Puede abrirse y cerrarse tantas veces como sea necesario.



Adhesivo Flexwear: equilibrio entre adherencia y protección cutánea por la combinación de hidrocoloide, elastómero, cross-linking EVA, para ofrecer mayor adhesividad y durabilidad del dispositivo.

Borde adhesivo alrededor del hidrocoloide, para proporcionar seguridad extra y adaptación a los contornos.

Paneles ComfortWear: suave al tacto, proporciona discreción y ayuda al confort del usuario.

Tamaño	Color	Diámetro	Código Nacional	Referencia
Midi	Opaca	∅ 13-64mm	495135	5625064
Maxi	Opaca	∅ 13-64mm	495184	5834064
Maxi	Transparente	∅ 13-64mm	495192	58400

Presentación: caja con 30 bolsas

Dimensiones unidad mínima de venta: 23,3cm largo x 16,4cm ancho x 8,1cm alto

Caducidad: 5 años

Financiado por el S.N.S.



Descripción:


- Bolsa abierta de una pieza, con forma simétrica y tamaño midi y maxi . Indicada para ayudar a los profesionales sanitarios y pacientes, en el tratamiento de una colostomía e ileostomía creada para la eliminación de heces líquidas y corrosivas, a través de un orificio artificial originado quirúrgicamente llamado estoma.

Materiales:

- Lámina adhesiva FlexWear: hidrocoloide, matriz de poliisobutileno, etilvinil acetato (EVA).
- Borde adhesivo: polietileno baja densidad con adhesivo acrílico.
- Revestimiento protector de la lámina: polietileno.
- Bolsa: etilvinil acetato/cloruro de polivinilideno.
- Tejido sin tejer: polietileno pigmentado.
- Ventana de visualización: etilvinil acetato
- Filtro: carbono activado/película EVA.
- Cierre integrado (Lock ´n Roll): poliéster.



Ningún componente contiene Látex.

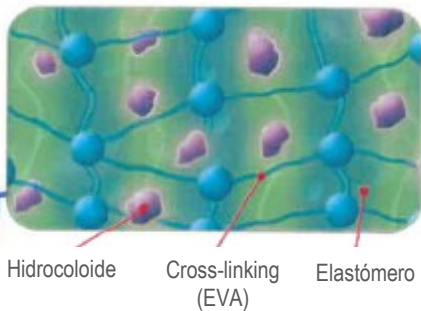


Hydrocoloide Cross-linking (EVA) Elastómero

Máxima protección cutánea y adherencia

La lámina FlexWear proporciona una excelente adhesión a la piel, y está diseñada para utilizarse durante más de un día, por su alta resistencia a la erosión, gracias a su composición, que combina el hidrocoloide y elastómero, con “cross-linking” (o entrecruzado) EVA. Se trata de una lámina plana, indicada para estomas protruidos, que puede recortarse a diferentes medidas, para adecuarla a la forma del estoma.

La lámina incorpora un “borde adhesivo” integrado alrededor del hidrocoloide, que puede ayudar a proporcionar una seguridad extra durante su uso, y un confort adicional gracias a su flexibilidad y adaptación a los contornos abdominales.

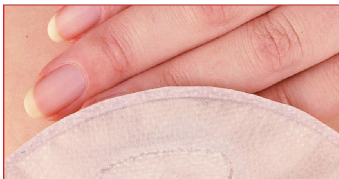

Paneles ComfortWear

Un tejido “sin tejer”, de color beige y textura similar a la tela, que recubre por los dos lados la bolsa, en la variante opaca; y por el lado en contacto con el cuerpo, en la variante transparente. El material es suave al tacto y proporciona discreción. El tejido sin tejer se seca tras el contacto con agua, y proporciona una experiencia de uso confortable.



Ventana de Visualización

Permite al profesional sanitario inspeccionar visualmente el estoma y su efluente sin necesidad de retirar la bolsa. Al tiempo, permite al paciente controlar la ubicación correcta de la bolsa alrededor del estoma, mientras coloca la lámina sobre la piel periestomal.




Eficacia anti-olor: Filtro AF300

El filtro AF300 está compuesto por carbón activado y recubierto por una película EVA. Cuenta con una superficie absorbente de gas de 300 mm². El filtro puede ayudar a reducir en hinchado de la bolsa, y el escape de olores de la misma. Permite una salida lenta del gas para su desodorización. Está listo para su uso, ya que no requiere manipulación ni cubre-filtros.



Cierre Integrado Lock ´n Roll con Microcierres

El cierre permite una manipulación muy sencilla e intuitiva. En tan solo tres pasos, se pliega sobre sí mismo y se cierra presionando la pestaña ligeramente, desde el centro hacia los extremos, quedando cerrado de modo seguro mediante los microcierres. Puede abrirse y cerrarse tantas veces como sea necesario, y permite un vaciado controlado del contenido de la bolsa. Se trata de un cierre higiénico, al permitir una limpieza completa con agua y jabón; y ofrece un gran confort y discreción, al quedar replegado sobre sí mismo y adaptándose al contorno del cuerpo.

 Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, a partir de 2020 reducimos los niveles de cloro de la película plástica de nuestras bolsas.

©HollisterIncorporated 2021

Hollister Ibérica S.A.
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27 Fax: 91 766 92 01
www.hollister.es