


## Bolsa Cerrada de 1 pieza



**Filtro AF300:** permite una salida lenta del gas y su desodorización; puede ayudar a reducir el hinchado de la bolsa por gas.

**Ventana de visualización:** permite al profesional sanitario inspeccionar visualmente el estoma y su efluente sin necesidad de retirar la bolsa.

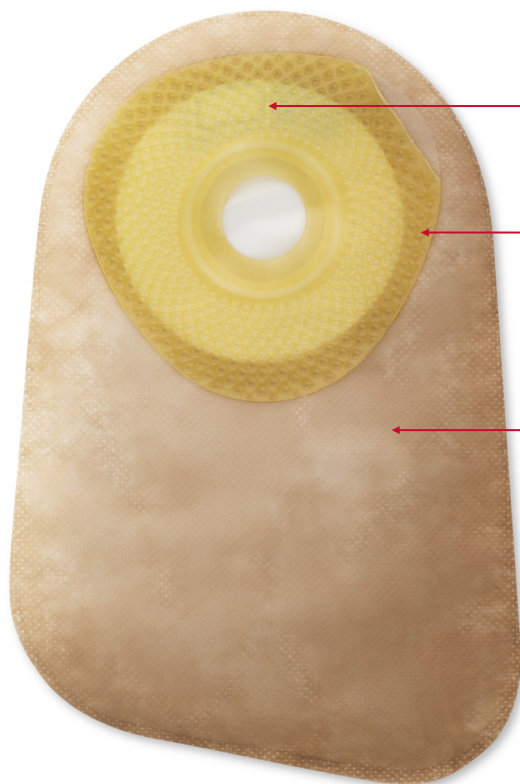

**Adhesivo SoftFlex:** equilibrio entre adherencia y protección cutánea con fibras de algodón, para dispositivos de aplicación y retirada continuada.

**Lámina con cámaras de aire:** de diseño alveolar

**Paneles ComfortWear:** suave al tacto, proporciona discreción y ayuda al confort del usuario.

| Tamaño | Color | Diámetro          | Código Nacional | Referencia |
|--------|-------|-------------------|-----------------|------------|
| Maxi   | Opaca | 3<15-55mm         | 496091          | 2234055    |
| Maxi   | Opaca | Oval 3<15-65x75mm | 490482          | 2234001    |

Financiado por el S.N.S.

**Presentación:** caja con 30 bolsas + 30 anillos microporo

**Dimensiones unidad mínima de venta:** 23,3cm largo x 16,4cm ancho x 8,1cm alto

**Caducidad:** 5 años



### Descripción:

Bolsa de colostomía de una pieza, con forma anatómica y tamaño maxi. Indicada para ayudar a los profesionales sanitarios y pacientes, en el tratamiento de una colostomía creada para la eliminación de las heces a través de un orificio artificial originado quirúrgicamente llamado estoma.

### Materiales:

Lámina: hidrocoloides, matriz de poliisobutileno, fibras de algodón.

Soporte de la lámina: polietileno baja densidad.

Revestimiento protector de la lámina: polietileno.

Bolsa: etilvinil acetato/cloruro de polivinilideno.

Tejido sin tejer: polietileno pigmentado.


Ventana de visualización: etilvinil acetato.

Filtro: carbono activado/película EVA (etilvinilacetato).

Anillos microporo: tejido no entrelazado de rayón/etilvinilacetato/adhesivo acrílico.




### Ningún componente contiene látex

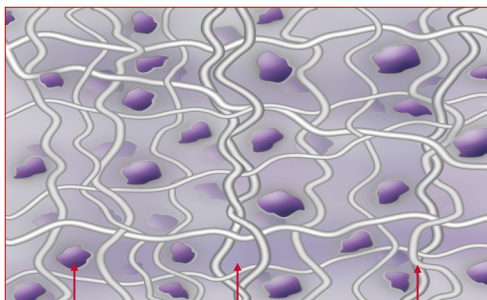

Hidrocoloide

Elastómero

Fibras Algodón

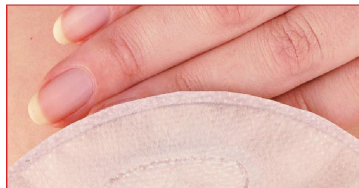

### Máxima protección cutánea y adherencia

La lámina SoftFlex es un excelente protector cutáneo, muy flexible, por lo que se adapta perfectamente a los movimientos abdominales. Presenta perfil decreciente para asegurar una máxima adhesión.

La lámina incorpora un diseño alveolar, consistente en una serie de hendiduras en la superficie adhesiva de la misma.

### Paneles ConfortWear

Un tejido "sin tejer", de color beige y textura similar a la tela, que recubre por los dos lados la bolsa, en la variante opaca; y por el lado en contacto con el cuerpo, en la variante transparente. El material es suave al tacto y proporciona discreción. El tejido sin tejer se seca tras el contacto con agua, y proporciona una experiencia de uso confortable.

### Ventana de Visualización

Permite al profesional sanitario inspeccionar visualmente el estoma y su efluente sin necesidad de retirar la bolsa. Al tiempo, permite al paciente controlar la ubicación correcta de la bolsa alrededor del estoma, mientras coloca la lámina sobre la piel periestomal.

### Eficacia anti-olor: Filtro AF300

El filtro AF300 está compuesto por carbón activado y recubierto por una película EVA. Cuenta con una superficie absorbente de gas de 300 mm<sup>2</sup>. El filtro puede ayudar a reducir el hinchado de la bolsa, y el escape de olores de la misma. Permite una salida lenta del gas para su desodorización. Está listo para su uso, ya que no requiere manipulación ni cubre-filtros.

 Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, a partir de 2020 reducimos los niveles de cloro de la película plástica de nuestras bolsas.

©HollisterIncorporated 2021

Hollister Ibérica S.A.  
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tel.: 91 383 87 27 Fax: 91 766 92 01  
www.hollister.es