


Bolsa Cerrada de 1 pieza



Filtro AF300: permite una salida lenta del gas y su desodorización; puede ayudar a reducir el hinchado de la bolsa por gas.

Ventana de visualización: permite al profesional sanitario inspeccionar visualmente el estoma y su efluente sin necesidad de retirar la bolsa.

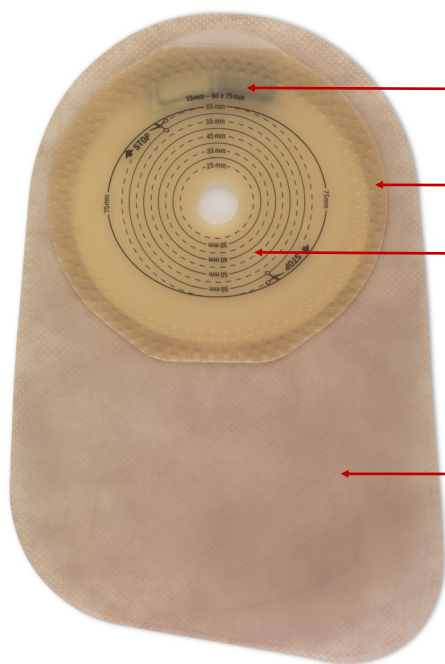

Adhesivo SoftFlex: equilibrio entre adherencia y protección cutánea con fibras de algodón, para dispositivos de aplicación y retirada continuada.

Lámina con cámaras de aire: de diseño alveolar

Superficie Ovalada: Proporciona una superficie adhesiva de 65 x 75 mm.

Paneles ComfortWear: suave al tacto, proporciona discreción y ayuda al confort del usuario.

Tamaño	Color	Diámetro	Código Nacional	Referencia
Maxi	Transparente	Oval $\approx$ 15-65x75mm	490490	22401
Maxi	Opaca	Oval $\approx$ 15-65x75mm	490482	2234001

Financiado por el S.N.S.

Presentación: caja con 30 bolsas + 30 anillos microporo

Dimensiones unidad mínima de venta: 23,3cm largo x 16,4cm ancho x 8,1cm alto

Caducidad: 5 años



Descripción:

Bolsa de colostomía de una pieza, con forma anatómica y tamaño maxi. Indicada para ayudar a los profesionales sanitarios y pacientes, en el tratamiento de una colostomía creada para la eliminación de las heces a través de un orificio artificial originado quirúrgicamente llamado estoma.

Materiales:

Lámina: hidrocoloides, matriz de poliisobutileno, fibras de algodón.

Soporte de la lámina: polietileno baja densidad.

Revestimiento protector de la lámina: polietileno.

Bolsa: etilvinil acetato/cloruro de polivinilideno.

Tejido sin tejer: polietileno pigmentado.


Ventana de visualización: etilvinil acetato.

Filtro: carbono activado/película EVA (etilvinilacetato).

Anillos microporo: tejido no entrelazado de rayón/etilvinilacetato/adhesivo acrílico.



Ningún componente contiene látex

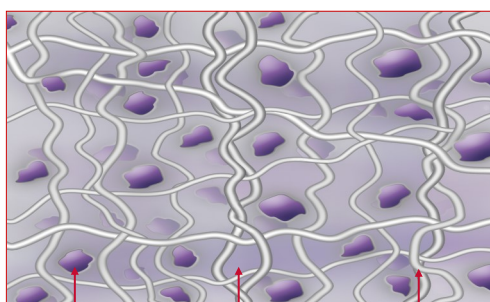

Hidrocoloide

Elastómero

Fibras Algodón

Máxima protección cutánea y adherencia

La lámina SoftFlex es un excelente protector cutáneo, muy flexible, por lo que se adapta perfectamente a los movimientos abdominales. Presenta perfil decreciente para asegurar una máxima adhesión.

La lámina incorpora un diseño alveolar, consistente en una serie de hendiduras en la superficie adhesiva de la misma.

Superficie Ovalada

La forma ovalada de la lámina presenta una mayor superficie adhesiva, para aquellas zonas en que exista necesidad, ya que presenta un área de recorte de 15 - 65x75 mm.

Paneles ComfortWear


Un tejido "sin tejer", de color beige y textura similar a la tela, que recubre por los dos lados la bolsa, en la variante opaca; y por el lado en contacto con el cuerpo, en la variante transparente. El material es suave al tacto y proporciona discreción. El tejido sin tejer se seca tras el contacto con agua, y proporciona una experiencia de uso confortable.

Ventana de Visualización

Permite al profesional sanitario inspeccionar visualmente el estoma y su efluente sin necesidad de retirar la bolsa. Al tiempo, permite al paciente controlar la ubicación correcta de la bolsa alrededor del estoma, mientras coloca la lámina sobre la piel periestomal.

Eficacia anti-olor: Filtro AF300

El filtro AF300 está compuesto por carbón activado y recubierto por una película EVA. Cuenta con una superficie absorbente de gas de 300 mm². El filtro puede ayudar a reducir el hinchado de la bolsa, y el escape de olores de la misma. Permite una salida lenta del gas para su desodorización. Está listo para su uso, ya que no requiere manipulación ni cubre-filtros.

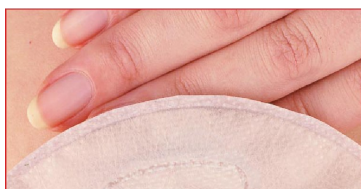

 Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, a partir de 2020 reducimos los niveles de cloro de la película plástica de nuestras bolsas.

©HollisterIncorporated 2021

Hollister Ibérica S.A.
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27 Fax: 91 766 92 01
www.hollister.es