


Bolsa Cerrada de 1 pieza



Filtro AF300: permite una salida lenta del gas y su desodorización; puede ayudar a reducir el hinchado de la bolsa por gas.

Ventana de visualización: permite al profesional sanitario inspeccionar visualmente el estoma y su efluente sin necesidad de retirar la bolsa.

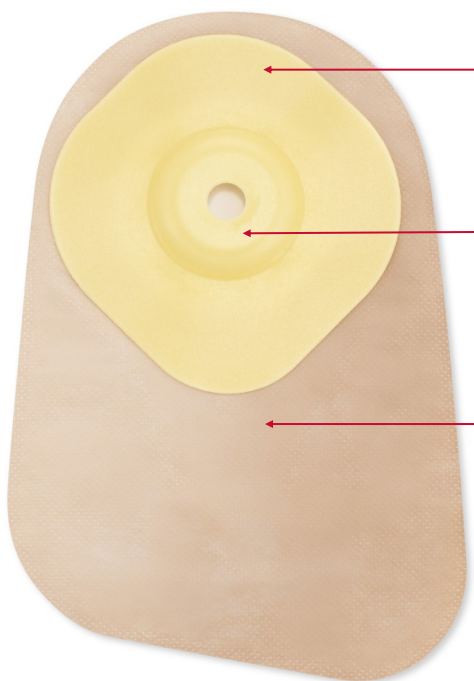

Adhesivo SoftFlex: equilibrio entre adherencia y protección cutánea con fibras de algodón, para dispositivos de aplicación y retirada continuada

Lámina con Convexidad Suave está diseñada para ofrecer un equilibrio entre flexibilidad, suavidad y durabilidad.

Paneles ComfortWear: suave al tacto, proporciona discreción y ayuda al confort del usuario.

Tamaño	Color	Diámetro	Código Nacional	Referencia
Maxi	Opaca	≈13-38mm	490508	2281038
Maxi	Opaca	≈13-55mm	490516	2281055

Presentación: caja con 30 bolsas + 30 anillos microporo

Dimensiones unidad mínima de venta: 23,3cm largo x 16,4cm ancho x 8,1cm alto

Caducidad: 5 años

Financiado por el S.N.S.



Descripción:

Bolsa de colostomía de una pieza, con forma anatómica y tamaño maxi. Indicada para ayudar a los profesionales sanitarios y pacientes, en el tratamiento de una colostomía creada para la eliminación de las heces a través de un orificio artificial originado quirúrgicamente llamado estoma.

Materiales:

Lámina: hidrocoloides, matriz de poliisobutileno, fibras de algodón.

Soporte de la lámina: polietileno baja densidad.

Revestimiento protector de la lámina: polietileno.

Bolsa: etilvinil acetato/cloruro de polivinilideno.

Tejido sin tejer: polietileno pigmentado.


Ventana de visualización: etilvinil acetato.

Filtro: carbono activado/película EVA (etilvinilacetato).

Anillos microporo: tejido no entrelazado de rayón/etilvinilacetato/adhesivo acrílico.



Ningún componente contiene látex

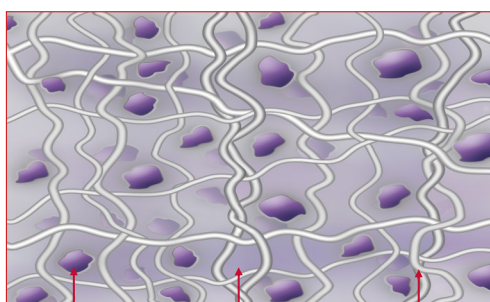

Hidrocoloide

Elastómero

Fibras Algodón

Máxima protección cutánea, adherencia y durabilidad

La lámina SoftFlex con Convexidad Suave está diseñada para ofrecer un equilibrio entre flexibilidad, suavidad y durabilidad. Está compuesta por materiales que ayudan a mejorar la adhesión, la resistencia a la erosión causada por el efluente intestinal, y la absorción, creando un entorno en el que la piel sana puede prosperar.

Este tipo de convexidad ejerce una suave presión alrededor del estoma, proporcionando un ajuste cómodo y seguro, ya que se adapta a las irregularidades del cuerpo.

La convexidad suave puede ser la mejor opción para crear el ajuste deseado, en pacientes ostomizados con pliegues o cicatrices alrededor del estoma, con estomas retraídos o planos, o con fugas debidas al uso de láminas planas. Puede utilizarse desde el post-operatorio inmediato.

Paneles ComfortWear


Un tejido "sin tejer", de color beige y textura similar a la tela, que recubre por los dos lados la bolsa, en la variante opaca; y por el lado en contacto con el cuerpo, en la variante transparente. El material es suave al tacto y proporciona discreción. El tejido sin tejer se seca tras el contacto con agua, y proporciona una experiencia de uso confortable.

Ventana de Visualización

Permite al profesional sanitario inspeccionar visualmente el estoma y su efluente sin necesidad de retirar la bolsa. Al tiempo, permite al paciente controlar la ubicación correcta de la bolsa alrededor del estoma, mientras coloca la lámina sobre la piel periestomal.

Eficacia anti-olor: Filtro AF300

El filtro AF300 está compuesto por carbón activado y recubierto por una película EVA. Cuenta con una superficie absorbente de gas de 300 mm². El filtro puede ayudar a reducir en hinchado de la bolsa, y el escape de olores de la misma. Permite una salida lenta del gas para su desodorización. Está listo para su uso, ya que no requiere manipulación ni cubre-filtros.

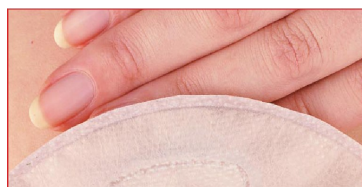

 Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, a partir de 2020 reducimos los niveles de cloro de la película plástica de nuestras bolsas.

©HollisterIncorporated 2021

Hollister Ibérica S.A.
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27 Fax: 91 766 92 01
www.hollister.es