




Ficha técnica

Conform 2 con Bolsa Cerrada + Lámina*
convexa CeraPlus™

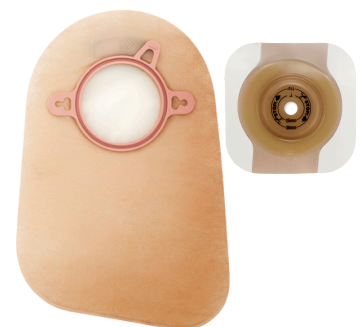

Láminas
CeraPlus™


Conform 2 Bolsa cerrada

Presillas para cinturón

- De fácil enganche
- En la misma bolsa para mayor seguridad

Filtro AF300

- Permite una salida gradual del gas y su desodorización

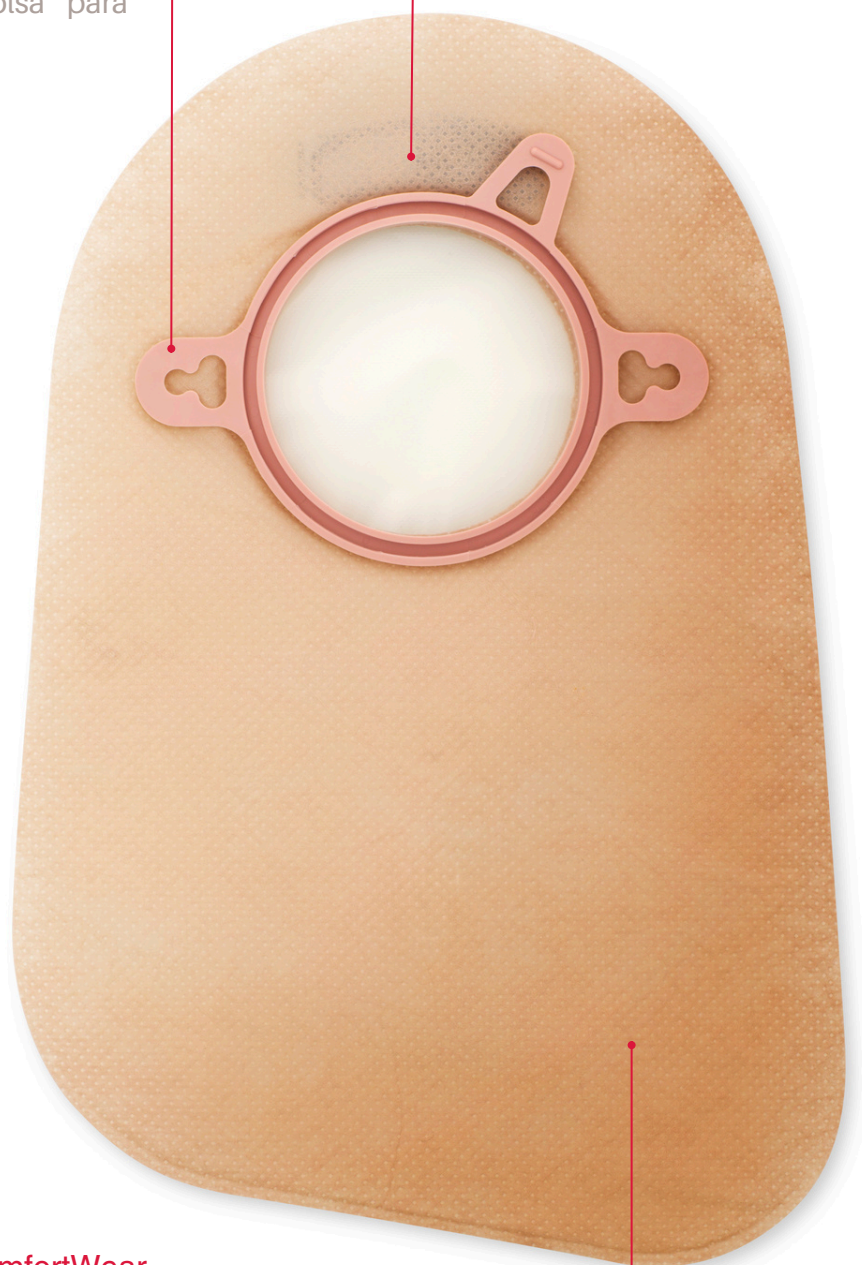

Paneles ComfortWear

- Un tejido "sin tejer", de color beige, que recubre por los dos lados la bolsa, en la variante opaca; y por el lado en contacto con el cuerpo en la variante transparente
- El material es suave al tacto y proporciona discreción. El tejido se seca tras el contacto con agua, proporcionando una experiencia de uso confortable.

Lámina convexa CeraPlus™ + Bolsa cerrada Conform 2

Descripción


La lámina CeraPlus™ está infundida con **ceramidas**, un lípido ceroso que mantiene unidos los corneocitos. La ceramida es un **componente natural** de la piel humana que ayuda a prevenir la pérdida de agua que puede provocar daño o sequedad de la piel. Está diseñada para mantener las propiedades adhesivas así como proteger la barrera de humedad natural y mantener una buena salud de la piel periestomal desde el primer día.

Lo que significa elegir una lámina CeraPlus™



El rol de las ceramidas


Piel Sana
mantiene la humedad dentro y los irritantes fuera

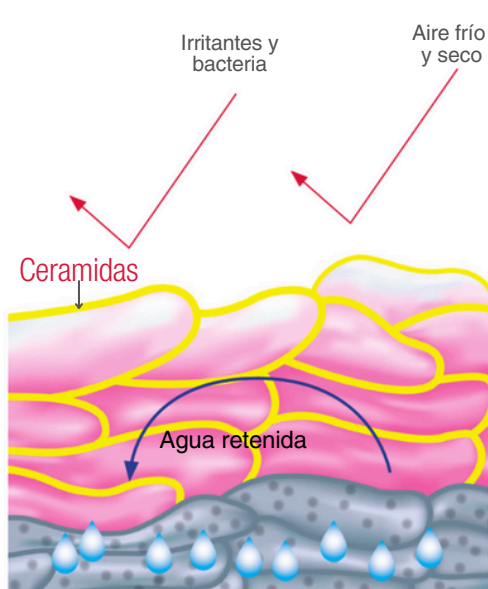

Abundante nivel de ceramidas:

- Más resistente frente a agresiones externas
- Mejor protección frente a la pérdida de agua
- Bien hidratada y flexible

Piel Dañada
Permite la entrada de irritantes y la salida de agua

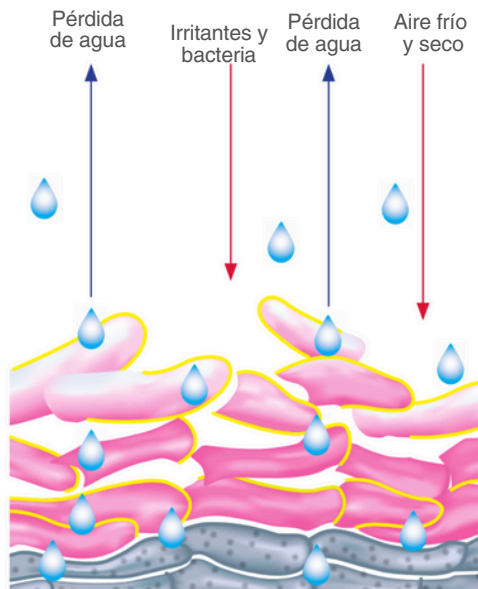

Bajo nivel de ceramidas:

- Más vulnerable a agresiones externas
- Más vulnerable frente a la pérdida de agua
- Susceptible a daños y sequedad

Referencias:

- (1) Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadaleña G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42
- (2) Grove G, Houser T, Sibbald G, Salvadaleña G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179-186. <https://doi.org/10.1111/srt.12630>
- (3) Nichols T, Houser T, Grove G. Comparing the skin stripping effects of three ostomy skin barriers infused with ceramide, honey or aloe; Journal of Stomal Therapy Australia 2019; 39(2):14-18

Lámina convexa CeraPlus™

Convexidad

La lámina convexa proporciona a los pacientes una combinación única de fijación y formulación. Indicada para protusión en caso de estoma plano o retraído.

Hidrocoloide infundido con ceramidas

- **Protege** la barrera natural de la piel
- **Reduce** la pérdida de agua transepidérmica
- **Mantiene** la piel periestomal sana desde el primer día

Borde Adhesivo

Se adapta a los pliegues abdominales proporcionando:

- **Flexibilidad** que se adapta a los pliegues abdominales para una fijación segura
- **Tranquilidad** con una sensación extra de seguridad

Aro flotante

Con un sencillo y audible clic, y gracias al aro flotante la lámina y la bolsa quedan firmemente ajustadas sin necesidad de presionar el abdomen.

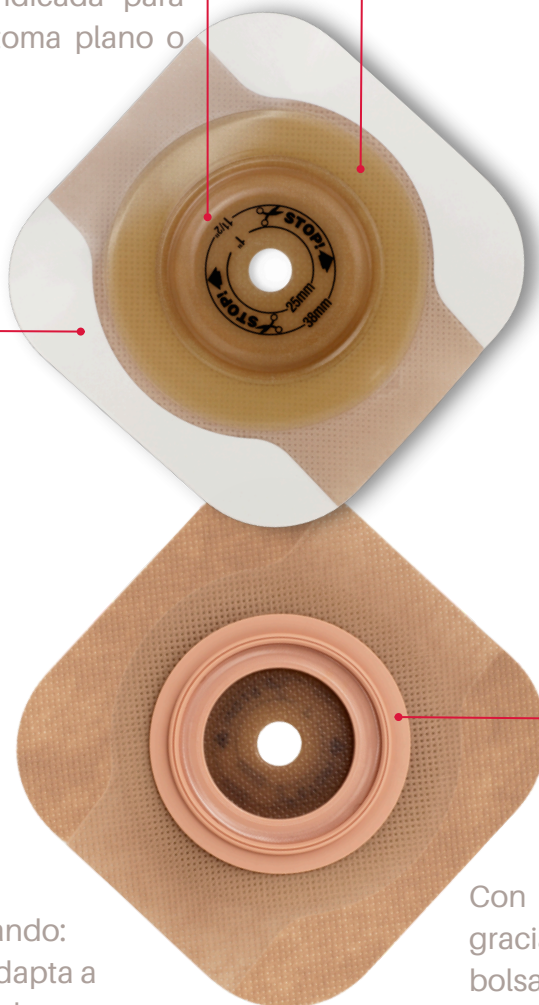


Lámina convexa CeraPlus™ con ceramidas + Bolsa cerrada Conform 2

Componentes



Componente	Material
Lámina CeraPlus™	Material hidrocoloide, ceramidas,
Aro Flotante	Polietileno de baja densidad
Estructura convexa	Polietileno de alta densidad
Borde Adhesivo	Polietileno spunbond
Revestimiento del Borde adhesivo	Polietileno sin tejer (non woven)
Bolsa	Etilenvinilacetato/cloruro de vinileno
Tejido sin tejer	Polietileno pigmentado
Filtro AF300	Carbono activado/película EVA (etilviniletilenvinilacetato)

Caducidad: 5 años



Libre de alcohol, látex y ftalatos

Tabla de referencias

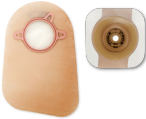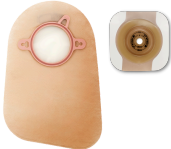	Color	Estoma	Aro	C.N.	Ref.	Tamaño
	Opaca	✂ 13-25 mm	45 mm	495804	24403	Bolsa Midi 550 ml
		✂ 13-38 mm	55 mm	495812	25403	
		✂ 13-51 mm	70 mm	495820	27403	
	Transparente	✂ 13-25 mm	45 mm	495838	24503	
		✂ 13-38 mm	55 mm	495846	25503	
	Opaca	✂ 13-38 mm	55 mm	496331	25423	Bolsa Maxi 700 ml
		✂ 13-51 mm	70 mm	496349	27423	

Cajas con 30 bolsas + 7 láminas convexas CeraPlus™ con ceramidas
Las láminas Convexas CeraPlus™ en caso de necesidad, se pueden adquirir por separado
Todos los productos mostrados en esta página están financiados por el S.N.S.



Los productos CeraPlus™ han recibido la acreditación oficial de la Skin Health Alliance, lo que puede aportar confianza y tranquilidad a tus pacientes.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

Hollister, el logo Hollister, Conform 2 y CeraPlus son marcas registradas de Hollister Incorporated. Otras marcas o copyrights son propiedad de sus propietarios.

©Hollister España Julio 2024



Hollister Ibérica S.A.
Avenida de Bruselas 13, 2ºD
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27
www.hollister.es



Ostomy Care
Piel Cuidada. Resultados Positivos