



Ross, Usuario de CeraPlus™

Ficha técnica

Conform 2 Bolsa Urostomía con Lámina convexa* CeraPlus™

¡NOVEDAD!

Los packs de Conform 2 convexos de urostomía incorporan Láminas CeraPlus infundidas con ceramidas



Lámina CeraPlus™ Convexa con Borde Adhesivo

Descripción


La lámina CeraPlus™ con tecnología Remois está infundida con **ceramidas**, un lípido ceroso que mantiene unidos los corneocitos. La ceramida es un **componente natural** de la piel humana que ayuda a prevenir la pérdida de agua que puede provocar daño o sequedad de la piel. Está diseñada para mantener las propiedades adhesivas así como a **proteger la barrera de humedad natural** y mantener una buena salud de la piel periestomal desde el primer día.

Las láminas CeraPlus han demostrado⁽¹⁾:

- Un **14% de reducción** relativa (período de 12 semanas de tratamiento) de los **costes asociados** al cuidado del estoma y de la salud de la piel periestomal.
- Un **25% de reducción** relativa de **complicaciones** de la piel periestomal.
- Una alta satisfacción en la **prevención del picor periestomal**.
- Un índice inferior de pérdida de agua transepidérmica (TEWL) respecto de otras láminas estándar y/o infundidas, lo que implica una **mayor protección de la barrera cutánea**.

El Rol de las Ceramidas

Piel Sana

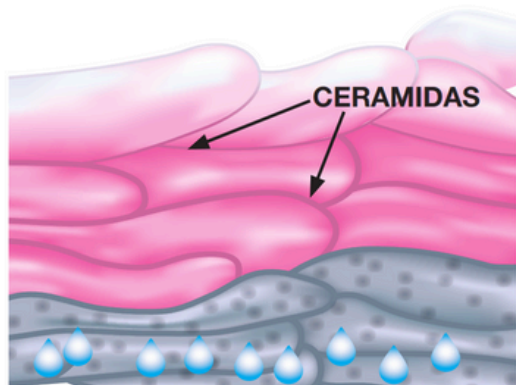


Abundante nivel de ceramidas:

- Más resistente frente a agresiones externas
- Mejor protección frente a la pérdida de agua
- Bien hidratada y flexible

Piel Dañada

(asociada con ciertas condiciones de la piel)

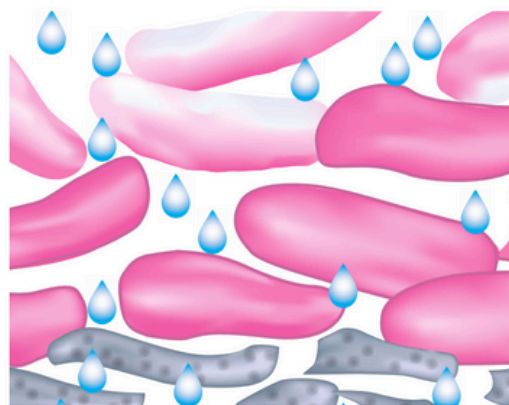

Bajo nivel de ceramidas:

- Más vulnerable a agresiones externas
- Más vulnerable frente a la pérdida de agua
- Susceptible a daños y sequedad

Referencias:

(1) Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadlena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42.

Lámina CeraPlus™ Convexa con Borde Adhesivo

Convexidad moderada

La lámina convexa que ahora incorpora ceramidas

Hidrocoloide infundido con ceramidas.
Diseñada para:

- **Protege** la barrera natural de la piel
- **Reduce** la pérdida de agua transepidérmica
- **Mantiene** la piel periestomal sana desde el primer día



Borde Adhesivo

Se adapta a los pliegues abdominales proporcionando:

- **Tranquilidad** con una sensación extra de seguridad
- **Flexibilidad** que se adapta a la anatomía, estirándose y ajustándose con una fijación segura
- **Simplicidad** de una solución todo en uno, fácil de usar

Aro flotante

Con un sencillo y audible clic, y gracias al aro flotante la lámina y la bolsa quedan firmemente ajustadas sin necesidad de presionar el abdomen

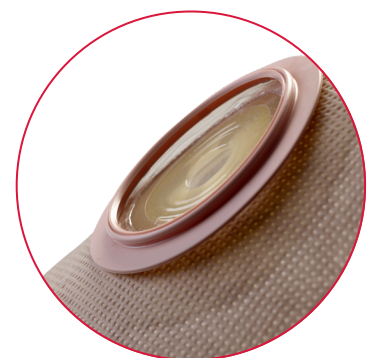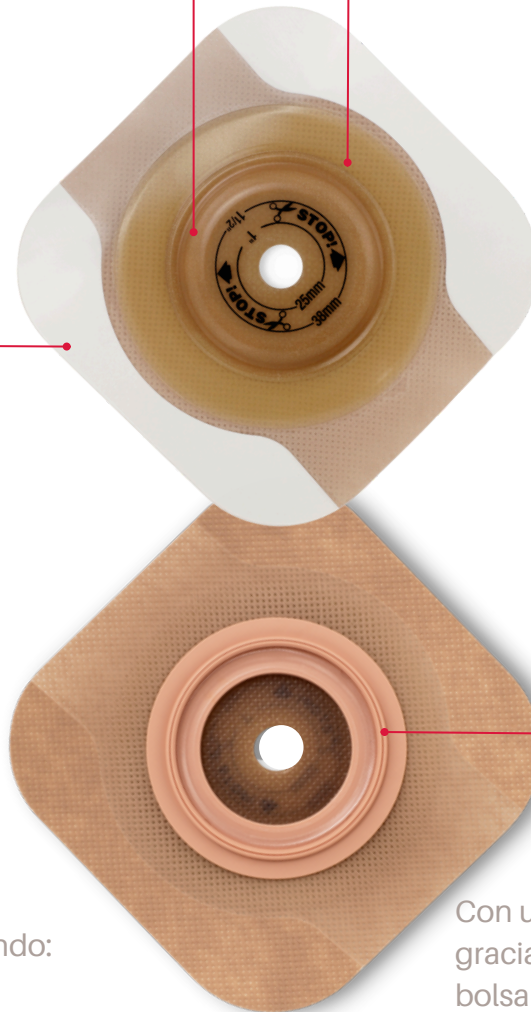

Conform 2 Bolsa urostomía

Presillas para cinturón

integradas en la bolsa para proporcionar una sensación extra de seguridad

Pestaña


para facilitar la retirada de la bolsa

Paneles ComfortWear

- Un tejido "sin tejer", de color beige y textura similar a la tela, que recubre por los dos lados la bolsa, en la variante opaca; y por el lado en contacto con el cuerpo en la variante transparente
- El material es suave al tacto y proporciona discreción. El tejido se seca tras el contacto con agua, proporcionando una experiencia de uso confortable

Válvula antirretorno

diseñada para minimizar el reflujo de orina, y evitar una potencial erosión de la lámina cutánea

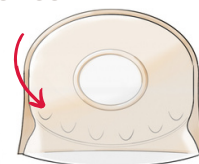

Multicanalidad

diseñada para facilitar una distribución equilibrada de la orina; se reduce así el perfil de la bolsa y aumenta la discreción



Válvula de vaciado

de material suave y diseño ergonómico, se adapta al cuerpo y permite identificar fácilmente cuando está cerrada



El **tubo adaptador** proporciona una conexión segura entre la bolsa de urostomía y una bolsa de orina para cama o para pierna



Adaptador universal que conecta las bolsas de urostomía de Hollister con las bolsas de orina que se encuentran actualmente disponibles en el mercado español



Lámina convexa CeraPlus™ + Bolsa Urostomía

Componente	Material
Lámina CeraPlus™	Material hidrocoloide, ceramidas, resina de hidrocarburo, caucho de estireno, butadieno hidrogenado, aceite mineral, pectina, poliisobutileno, carboximetilcelulosa de sodio
Aro Flotante	Polietileno de baja densidad
Estructura convexa	Copolímero de etileno y acetato de vinilo
Protector de la lámina (a retirar antes de su aplicación)	Tereftalato de polietileno
Borde Adhesivo	Polietileno spunbond
Revestimiento del Borde adhesivo	Polietileno sin tejer (non woven)
Bolsa	Etilvinilacetato/cloruro de polivinilideno
Tejido sin tejer	Polietileno pigmentado
Válvula antirretorno	Etilvinilacetato
Válvula de vaciado	polietileno de baja y alta densidad/elastómero termoplástico/oleamida
Adaptador	elastómero termoplástico y resina acetal

Tabla de referencias



Color	Tamaño bolsa	Estoma	Aro	C.N.	Referencia
Opaca	300 ml	⌀ 13-25 mm	45 mm	492199	24735
		⌀ 13-38 mm	55 mm	492215	25733
Transparente	300 ml	⌀ 13-25 mm	45 mm	492207	24833
		⌀ 13-38 mm	55 mm	492223	25833

Cajas con 30 bolsas + 7 láminas CeraPlus™ convexas con borde adhesivo + 3 adaptadores
Dimensiones unidad mínima de venta: 23,3 cm largo x 16,4 cm ancho x 11,7 cm alto
Las láminas CeraPlus™ se pueden adquirir por separado.

Caducidad: 5 años



Libre de alcohol, látex y ftalatos

Clasificación:

Según RD 1591/2009. Producto Sanitario de Clase I

Productos financiados por el S.N.S.

*Los productos CeraPlus™ han recibido la acreditación de Skin Health Alliance. Esta acreditación responde a las normas relativas a la seguridad, eficacia, ética y sostenibilidad. La calidad de estos productos ha sido corroborada por dermatólogos independientes. Para más información, visita Skin Health Alliance.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

Hollister, el logo Hollister, CeraPlus, Conform 2 y ComfortWear son marcas registradas de Hollister Incorporated. No todos los productos tienen marcado CE. Otras marcas o copyrights son propiedad de sus propietarios.

©Hollister España 2024



Hollister Ibérica S.A.
Avenida de Bruselas 13, 2ºD
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27
www.hollister.es