

Ficha Técnica

Conform 2 Bolsa Urostomía +
Lámina plana con Borde Adhesivo

Bolsa

Presillas para cinturón

integradas en la bolsa para proporcionar una sensación extra de seguridad

Pestaña


para facilitar la retirada de la bolsa

Paneles ComfortWear

- Un tejido "sin tejer", de color beige y textura similar a la tela, que recubre por los dos lados la bolsa, en la variante opaca; y por el lado en contacto con el cuerpo en la variante transparente
- El material es suave al tacto y proporciona discreción. El tejido se seca tras el contacto con agua, proporcionando una experiencia de uso confortable.


Válvula antirretorno

diseñada para minimizar el reflujo de orina, y evitar una potencial erosión de la lámina cutánea

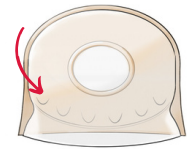

Multicanalidad

diseñada para facilitar una distribución equilibrada de la orina; se reduce así el perfil de la bolsa y aumenta la discreción

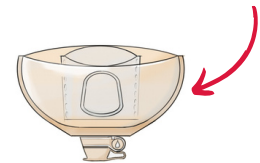

Válvula de vaciado

de material suave y diseño ergonómico, se adapta al cuerpo y permite identificar fácilmente cuando está cerrada



El **tubo adaptado** proporciona una conexión segura entre la bolsa de urostomía y una bolsa de orina para cama o para pierna




Adaptador universal que conecta las bolsas de urostomía de Hollister con las bolsas de orina que se encuentran actualmente disponibles en el mercado español



Lámina

Borde Adhesivo

se adapta a los pliegues abdominales y aporta un extra de tranquilidad antes las posibles fugas

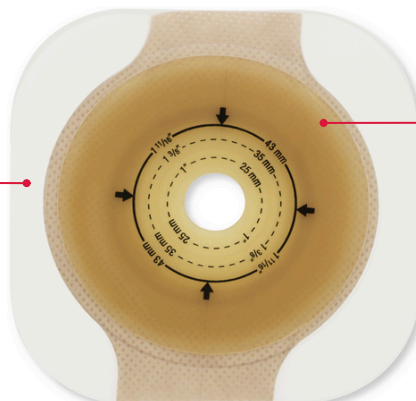

Formulación FlexWear

permite cambios menos frecuentes

Anillo flotante y Acople CPL

la lámina y la bolsa quedan firmemente cerradas sin necesidad de presionar el abdomen



Conform 2 Bolsa Urostomía + Lámina plana con Borde Adhesivo

Componente	Material
Lámina FlexWear	Poliisobutileno, Pectina, Carboximetilcelulosa Sódica
Aro Flotante	Polietileno de baja densidad
Protector de la lámina (a retirar antes de su aplicación)	Tereftalato de polietileno
Borde Adhesivo	Polietileno spunbond
Revestimiento del Borde adhesivo	Polietileno sin tejer (non woven)
Bolsa	Etilvinilacetato/cloruro de polivinilideno
Tejido sin tejer	Polietileno pigmentado
Válvula antirretorno	Etilvinilacetato
Válvula de vaciado	polietileno de baja y alta densidad/elastómero termoplástico/oleamida
Adaptador	elastómero termoplástico y resina acetal

Tabla de referencias



Color	Tamaño bolsa	Estoma	Aro	C.N.	Referencia
Opaca	300 ml	Precortada 20 mm	45 mm	499343	24731
		Precortada 25 mm	45 mm	499350	24732
		Precortada 30 mm	45 mm	499368	24736
		Precortada 35 mm	55 mm	499376	25731
		Precortada 40 mm	55 mm	499384	25732
Transparente	300 ml	∅ 13-32 mm	45 mm	499392	24832
		∅ 13-44 mm	55 mm	499400	25832
		∅ 13-57 mm	70 mm	-	27832**

Cajas con 30 bolsas + 7 láminas con borde adhesivo + 3 adaptadores
Las láminas se pueden adquirir por separado

Dimensiones unidad mínima de venta: 23,3 cm largo x 16,4 cm ancho x 11,7 cm alto

Productos financiados por el S.N.S. excepto **

Caducidad: 5 años



Libre de alcohol, látex y ftalatos

Clasificación:

Según RD 1591/2009. Producto Sanitario de Clase I

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

Hollister, el logo de Hollister, ComfortWear y Conform 2 son marcas registradas de Hollister Incorporated

©Hollister España Mayo 2024

Hollister Ibérica S.A.
Avenida de Bruselas 13, 2ºD
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27
www.hollister.es