



Ficha técnica

Lámina CeraPlus™ Convexa con Borde Adhesivo
infundida con ceramidas



CeraPlus™
Ostomy Products

Lámina CeraPlus™ Convexa con Borde Adhesivo

Descripción


La lámina CeraPlus™ con tecnología Remois está infundida con **ceramidas**, un lípido ceroso que mantiene unidos los corneocitos. La ceramida es un **componente natural** de la piel humana que ayuda a prevenir la pérdida de agua que puede provocar daño o sequedad de la piel. Está diseñada para mantener las propiedades adhesivas así como a **proteger la barrera de humedad natural** y mantener una buena salud de la piel periestomal desde el primer día.

Las láminas CeraPlus han demostrado (1):

- Un **14% de reducción** relativa (período de 12 semanas de tratamiento) de los **costes asociados** al cuidado del estoma y de la salud de la piel periestomal.
- Un **25% de reducción** relativa de **complicaciones** de la piel periestomal.
- Una alta satisfacción en la **prevención del picor periestomal**.
- Un índice inferior de pérdida de agua transepidérmica (TEWL) respecto de otras láminas estándar y/o infundidas, lo que implica una **mayor protección de la barrera cutánea**.

El Rol de las Ceramidas

Piel Sana

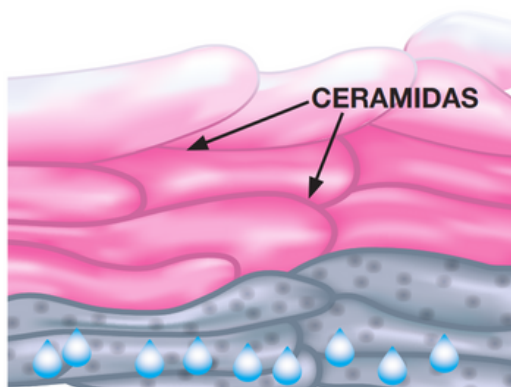


Abundante nivel de ceramidas:

- Más resistente frente a agresiones externas
- Mejor protección frente a la pérdida de agua
- Bien hidratada y flexible

Piel Dañada

(asociada con ciertas condiciones de la piel)

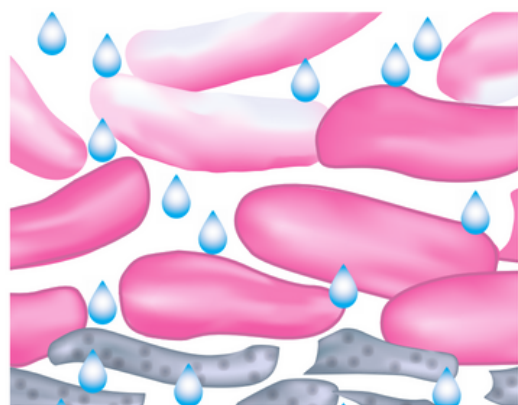

Bajo nivel de ceramidas:

- Más vulnerable a agresiones externas
- Más vulnerable frente a la pérdida de agua
- Susceptible a daños y sequedad

Referencias:

(1) Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42.

Lámina CeraPlus™ Convexa con Borde Adhesivo

Convexidad

La lámina convexa proporciona a los pacientes una combinación única de fijación y formulación que los pacientes merecen.

Hidrocoloide infundido con ceramidas

- **Protege** la barrera natural de la piel
- **Reduce** la pérdida de agua transepidérmica
- **Mantiene** la piel periestomal sana desde el primer día

Borde Adhesivo

Se adapta a los pliegues abdominales proporcionando:

- **Tranquilidad** con una sensación extra de seguridad
- **Flexibilidad** que se adapta a la anatomía, estirándose y ajustándose con una fijación segura
- **Simplicidad** de una solución todo en uno, fácil de usar

Aro flotante

Con un sencillo y audible clic, y gracias al aro flotante la lámina y la bolsa quedan firmemente ajustadas sin necesidad de presionar el abdomen.

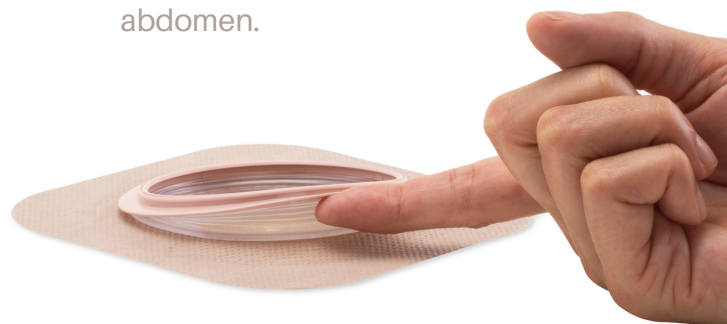
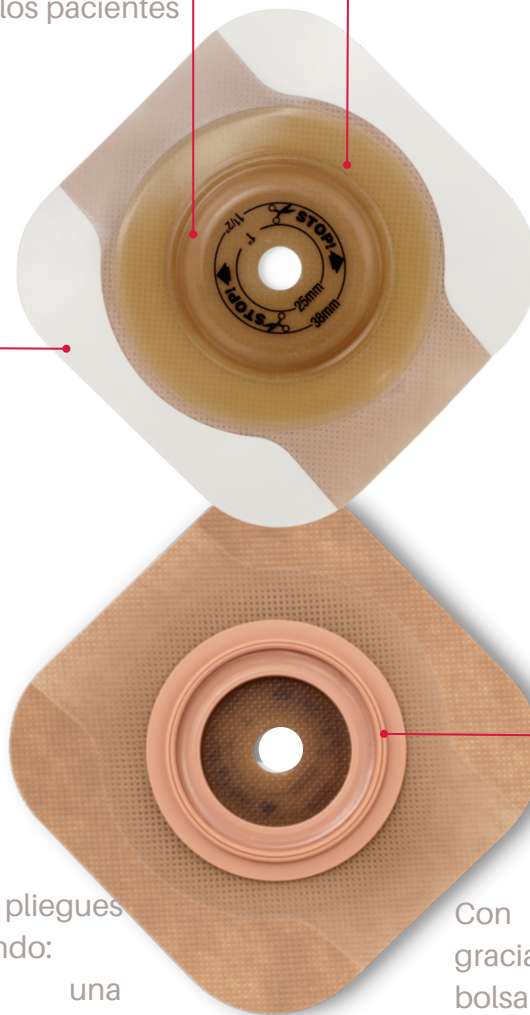


Lámina CeraPlus™ Convexa con Borde Adhesivo

Componentes

Componente	Material
Lámina CeraPlus	Material hidrocólicoide, ceramidas, resina de hidrocarburo, caucho de estireno, butadieno hidrogenado, aceite mineral, pectina, poliisobutileno, carboximetilcelulosa de sodio
Aro Flotante	Polietileno de baja densidad
Convexidad	Copolímero de etileno y acetato de vinilo
Protector de la lámina (a retirar antes de su aplicación)	Tereftalato de polietileno
Borde Adhesivo	Polietileno spunbond
Revestimiento del Borde adhesivo	polietileno sin tejer (non woven)

Libre de alcohol, látex y ftalatos

Caducidad: 5 años



Tabla de referencias



Descripción	Estoma	Aro	C.N.	Ref.	Caja
Lámina CeraPlus™ Convexa con Borde Adhesivo	∅ 13-25 mm	45 mm	400096	14400	5 uds
	22 mm	45 mm	400097	14420	5 uds
	25 mm	45 mm	400098	14425	5 uds
	∅ 13-38 mm	55 mm	400099	15400	5 uds
	29 mm	55 mm	400100	15429	5 uds
	32 mm	55 mm	400102	15432	5 uds
	∅ 13-51 mm	70 mm	400103	17400	5 uds

Todos los productos mostrados en esta página están financiados por el S.N.S.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

El logo de Hollister, CeraPlus y CeraRing son marcas registradas de Hollister Incorporated
©Hollister España Mayo 2023



*Remois es una tecnología de Alcare Co., Ltd.



Hollister Ibérica S.A.
Avenida de Bruselas 13, 2ºD
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27
www.hollister.es