



# Ficha técnica

Lámina CeraPlus™ Convexa Suave con Borde Adhesivo, infundida con ceramidas



CeraPlus™  
Ostomy Products

# Lámina CeraPlus™ Convexa Suave con Borde Adhesivo

## Descripción

La lámina CeraPlus™ con tecnología Remois está infundida con **ceramidas**, un lípido ceroso que mantiene unidos los corneocitos. La ceramida es un **componente natural** de la piel humana que ayuda a prevenir la pérdida de agua que puede provocar daño o sequedad de la piel. Está diseñada para mantener las propiedades adhesivas así como a proteger la barrera de humedad natural y mantener una buena salud de la piel periestomal desde el primer día.

## Las láminas CeraPlus han demostrado (1):


- Un **14% de reducción** relativa (período de 12 semanas de tratamiento) de los **costes asociados** al cuidado del estoma y de la salud de la piel periestomal.
- Un **25%** de **reducción** relativa de **complicaciones** de la piel periestomal.
- Una alta satisfacción en la **prevención del picor periestomal**.
- Un índice inferior de pérdida de agua transepidérmica (TEWL) respecto de otras láminas estándar y/o infundidas, lo que implica una **mayor protección de la barrera cutánea**.

## Las láminas CeraPlus con Convexidad Suave ofrece una fijación óptima y flexible (2):

- Un 94% estuvieron satisfechos o muy satisfechos con la flexibilidad
- **91%** estuvieron satisfechos o muy satisfechos con la habilidad para obtener la mayor fijación

## El Rol de las Ceramidas

### Piel Sana

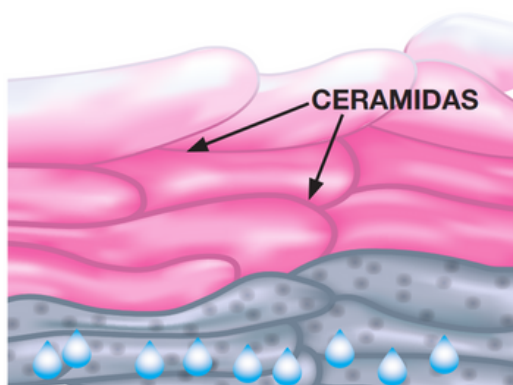


#### Abundante nivel de ceramidas:

- Más resistente frente a agresiones externas
- Mejor protección frente a la pérdida de agua
- Bien hidratada y flexible

### Piel Dañada

(asociada con ciertas condiciones de la piel)

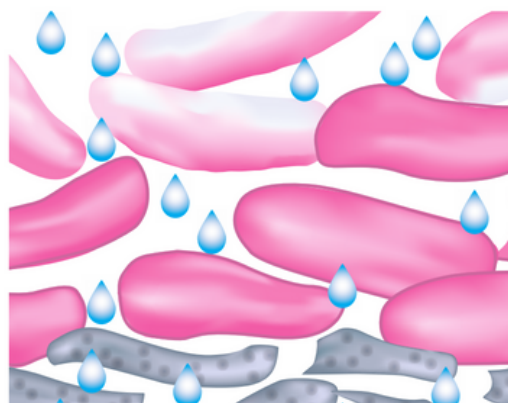

#### Bajo nivel de ceramidas:

- Más vulnerable a agresiones externas
- Más vulnerable frente a la pérdida de agua
- Susceptible a daños y sequedad

#### Referencias:

(1) Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42.

(2) 322 Evaluaciones. Datos de archivo de Hollister, ref-02530. Mayo 2021

# Lámina CeraPlus™ Convexa Suave con Borde Adhesivo




## Convexidad Suave

La flexibilidad de la lámina con Convexidad Suave está diseñada para proporcionar una presión suave alrededor del estoma y obtener un ajuste adecuado que se adapte a las superficies irregulares de la piel.

## Hidrocoloide infundido con ceramidas

- **Protege** la barrera natural de la piel
- **Reduce** la pérdida de agua transepidérmica
- **Mantiene** la piel periestomal sana desde el primer día

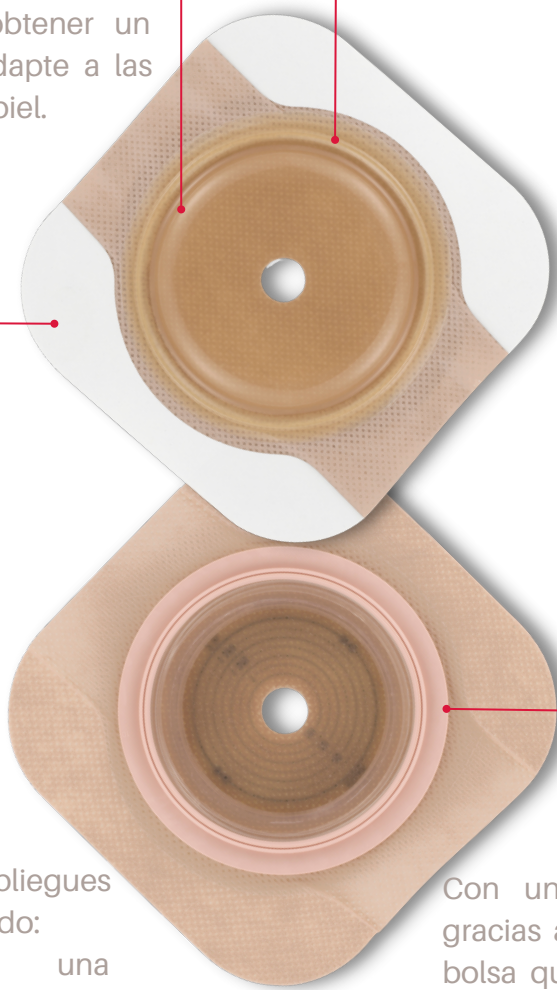


## Borde Adhesivo

Se adapta a los pliegues abdominales proporcionando:

- **Tranquilidad** con una sensación extra de seguridad
- **Flexibilidad** que se adapta a la anatomía, estirándose y ajustándose con una fijación segura
- **Simplicidad** de una solución todo en uno, fácil de usar

## Aro flotante

Con un sencillo y audible clic, y gracias al aro flotante la lámina y la bolsa quedan firmemente ajustadas sin necesidad de presionar el abdomen.

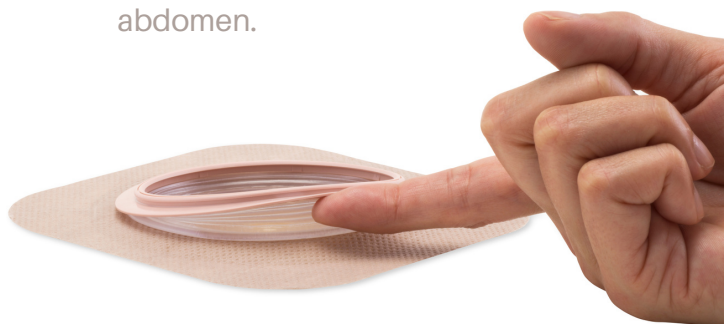

# Lámina CeraPlus™ Convexa Suave con Borde Adhesivo

## Componentes

Componente	Material
Lámina CeraPlus	Material hidrocoloide, ceramidas, resina de hidrocarburo, caucho de estireno, butadieno hidrogenado, aceite mineral, pectina, poliisobutileno, carboximetilcelulosa de sodio
Aro Flotante	Polietileno de baja densidad
Convexidad	Copolímero de etileno y acetato de vinilo
Protector de la lámina (a retirar antes de su aplicación)	Tereftalato de polietileno
Borde Adhesivo	Polietileno spunbond
Revestimiento del Borde adhesivo	polietileno sin tejer (non woven)

Libre de alcohol, látex y ftalatos

**Caducidad:** 5 años



## Tabla de referencias

Descripción	Estoma	Aro	C.N.	Ref.	Caja
 Lámina CeraPlus™ Convexa Suave y Borde Adhesivo	✂ 13-25 mm	45 mm	473686	14A00	5 uds
	22 mm	45 mm	473694	14A20	5 uds
	25 mm	45 mm	473702	14A25	5 uds
	✂ 13 -38 mm	55 mm	473744	15A00	5 uds
	29 mm	55 mm	473710	15A29	5 uds
	✂ 32 mm	55 mm	473728	15A32	5 uds
	13-51 mm	70 mm	473777	17A00	5 uds

Todos los productos mostrados en esta página están financiados por el S.N.S.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

El logo de Hollister, CeraPlus y CeraRing son marcas registradas de Hollister Incorporated  
©Hollister España Mayo 2023



\*Remois es una tecnología de Alcare Co., Ltd.



Hollister Ibérica S.A.  
Avenida de Bruselas 13, 2ºD  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tel.: 91 383 87 27  
[www.hollister.es](http://www.hollister.es)